

Cryo 7

Manuel d'entretien
et règles de bon usage pour
le dispositif de cryothérapie
Cryo 7 et **Cryo 7 Pro**



Principes d'entretiens et règles de bon usage pour le Cryo 7

Mode économie d'énergie avancé : le compresseur peut s'éteindre même pendant le traitement, ce qui permet d'économiser de l'énergie et d'être très économique

Conception silencieuse : notre cryothérapie la plus silencieuse de tous les temps, que ce soit pendant le refroidissement ou pendant le traitement actif

Le **tuyau de 2,5 mètres** est fabriqué à partir de **nouveaux matériaux extrêmement résistants**. Il dispose d'une sortie de tuyau de thérapie adaptable avec une fixation magnétique

L'optimisation de l'espace se traduit par une **réduction significative de l'encombrement**, résultant d'une utilisation particulièrement efficace de l'espace disponible

Hauteur de travail **ergonomique**

Grand écran tactile **haute résolution**, affichage en couleur et luminosité optimale

L'amélioration de l'efficacité est obtenue grâce à un système de refroidissement distinct pour le moteur, ce qui permet de réduire la température de pré-refroidissement de l'air destiné à la thérapie

Le dégivrage est intelligemment dissimulé dans le compartiment du récipient d'eau



Quelques directives

à suivre :

Afin d'assurer une **qualité de soin optimale** et une **durée d'utilisation maximale** de votre équipement, il est essentiel de maintenir un **ENTRETIEN RIGoureux**.

→ LE DÉGIVRAGE DE L'APPAREIL :


- Le dégivrage doit être effectué **une fois par semaine**, de préférence à la fin de la semaine, avant la fermeture du cabinet pour le week-end.
- Lorsque l'appareil est allumé et que vous êtes sur l'écran principal, il vous suffit de cliquer sur la fonction de dégivrage.
- Attendez que le dégivrage soit terminé. Pendant ce temps, l'appareil dégivrera le circuit de refroidissement pour éliminer toute accumulation de glace.
- Une fois le dégivrage achevé, l'appareil reviendra à son fonctionnement normal, et il vous suffira de l'éteindre.
- Pour une efficacité optimale, laissez l'appareil éteint pendant 24 à 48 heures après le dégivrage.

→ L'ENTRETIEN DU FILTRE ARRIÈRE :

- **Pour entretenir le filtre à air**, vous pouvez facilement le nettoyer chaque semaine en aspirant la surface du filtre arrière. Aucun démontage n'est nécessaire, il vous suffit de **passer l'aspirateur sur toute la surface du filtre**.
- Pour le Cryo 7, le changement du filtre s'effectue **après 1000 heures d'utilisation**, soit environs 20 000 traitements.

EN CAS DE DOUTE OU DE QUESTIONS, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE **SERVICE APRÈS-VENTE** DE VOTRE DISTRIBUTEUR.

Lancer le **dégivrage**

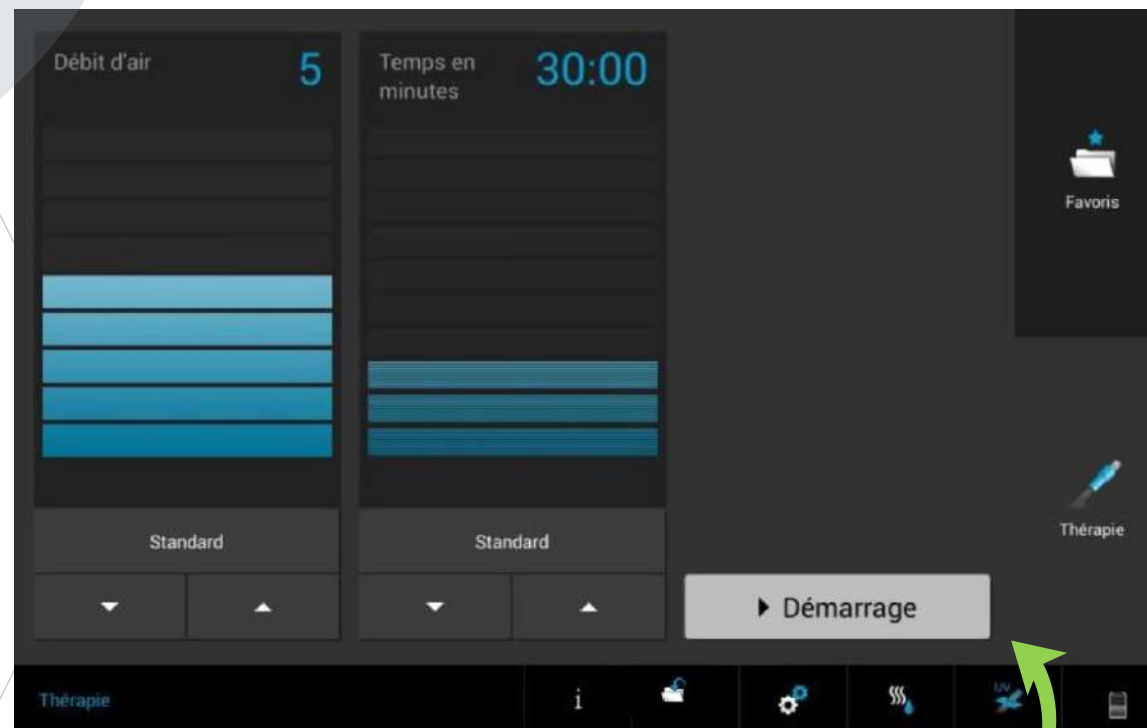

En appuyant sur le bouton "**dégivrage**", vous lancerez le programme.

Vider le réservoir d'eau



1

Localisez facilement le **bouton d'ouverture** du bac à eau grâce à sa couleur rouge sur la photo.



2

Presser le bouton.



3

Le **réceptif d'eau** est facilement accessible, ce qui simplifie la vidange.

Principes d'**entretiens** et règles de **bon usage** pour le **Cryo 7**

La sortie d'air pivote
à **90°** afin que vous
puissiez atteindre
toute zone de
traitement.




Nettoyer le **filtre à air**

Le filtre à air doit être nettoyé **CHAQUE SEMAINE** à l'aide d'un aspirateur. Vous pouvez simplement **passer l'aspirateur** sur la grille arrière du Cryo 7 en moins de 30 secondes. Cette opération ne nécessite aucun démontage.


Une alerte pour le remplacement du filtre s'affichera après environ **700 heures d'utilisation**.

Lorsque vous atteindrez 1000 heures d'utilisation (soit environ 20 000 traitements !), le remplacement du filtre pourra être effectué facilement, sans nécessiter d'outils.

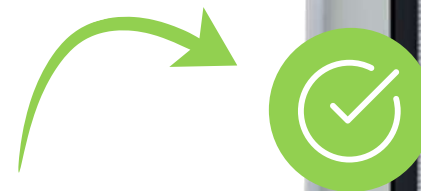

EN CAS DE DOUTE OU DE QUESTIONS, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE DE VOTRE DISTRIBUTEUR.

Option Bras inox

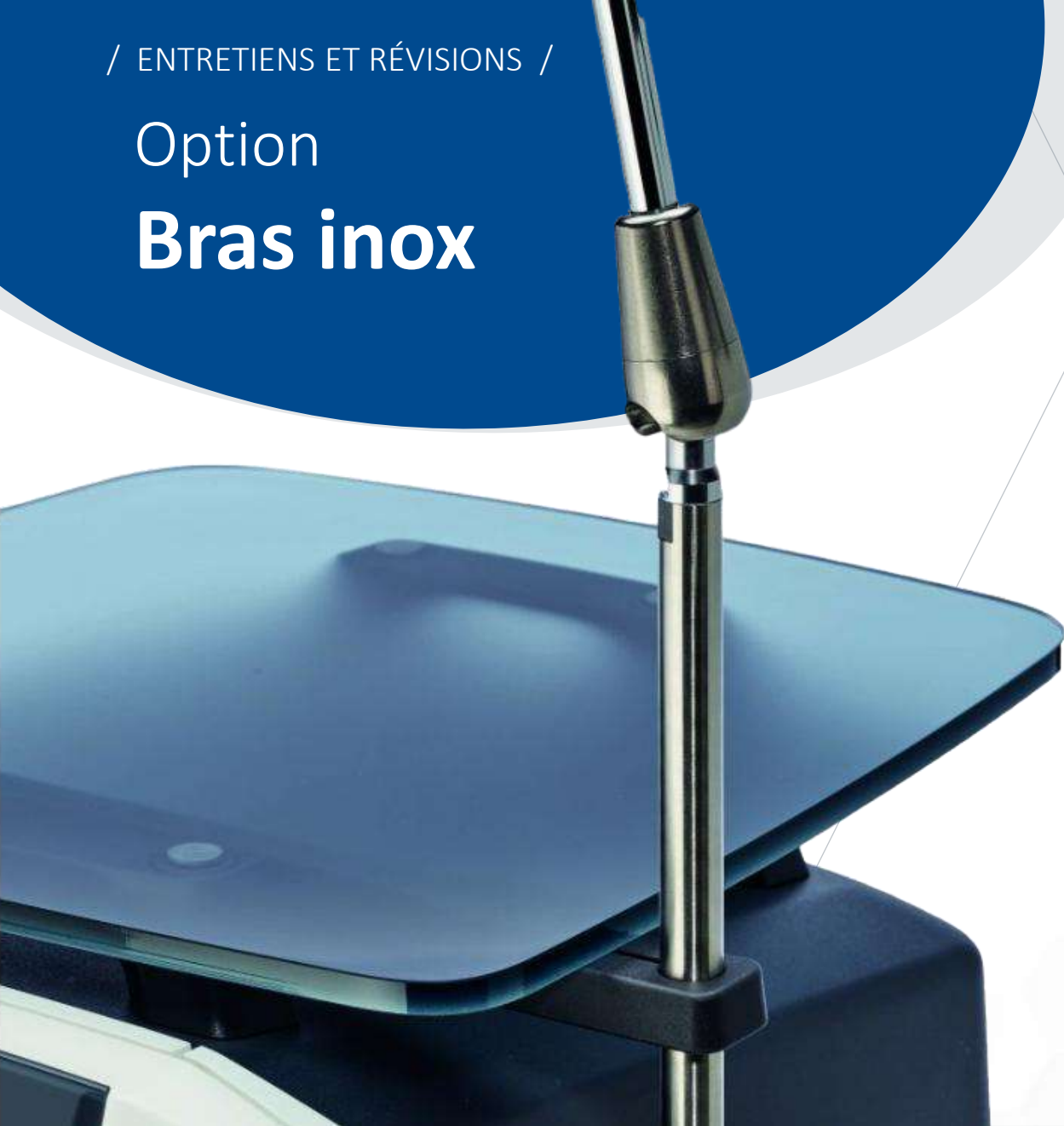

Vos besoins évoluent ?

Vous avez la possibilité d'ajouter facilement le **bras de maintien réglable en inox**, pour faciliter les traitements avec votre **Cryo 7** et votre **Cryo 7 Pro**.

